



BLAISE PASCAL
PT 2020-2021

TP 15 – Optique

Interféromètre de Michelson

Objectifs

- ▷ *S'approprier, réaliser* : régler un interféromètre de Michelson en utilisant un protocole fourni ;
- ▷ *Réaliser* des mesures interférométriques (spectroscopie et mesure d'indice) ;
- ▷ *S'approprier* : proposer un modèle à partir d'informations issues d'un document ;
- ▷ *Analyser* : confronter les résultats expérimentaux à des valeurs issues d'un document.

Matériel sur votre paillasse :

- ▷ Un interféromètre de Michelson !
- ▷ Laser vert Nd :YAG ;
- ▷ Diode laser rouge ;
- ▷ Élargisseur de faisceau (objectif de microscope) ;
- ▷ Lampe à vapeur de mercure ;
- ▷ Lampe blanche ;
- ▷ Un condenseur ;
- ▷ Deux lentilles de focales 20 cm et 1 m ;
- ▷ Une lamelle de microscope et un support (pied, noix et pince).

Le premier objectif de ce TP est d'apprendre à régler un interféromètre de Michelson. Une fois ceci fait, nous l'utiliserons pour réaliser deux types de mesures interférométriques : d'une part une mesure de type spectroscopique, en étudiant les modes d'une diode laser, et d'autre part une mesure d'indice optique d'un verre, en travaillant en lumière blanche.

I - Réglage de l'interféromètre

I.A - Présentation de l'interféromètre

Un interféromètre de Michelson est un instrument d'optique complexe, précis, sensible ... et donc onéreux : premier prix de l'ordre de 2000€. Un interféromètre compte deux miroirs de précision (\mathcal{M}_1 et \mathcal{M}_2), un dispositif de séparation qui assure la division d'amplitude (association de deux lames de verre \mathcal{S} et \mathcal{C}) ... et de nombreuses vis de réglage. Une photo vue de dessus et un schéma sont représentés figure 1 : identifier le rôle de chaque vis de l'interféromètre que vous avez sous les yeux.

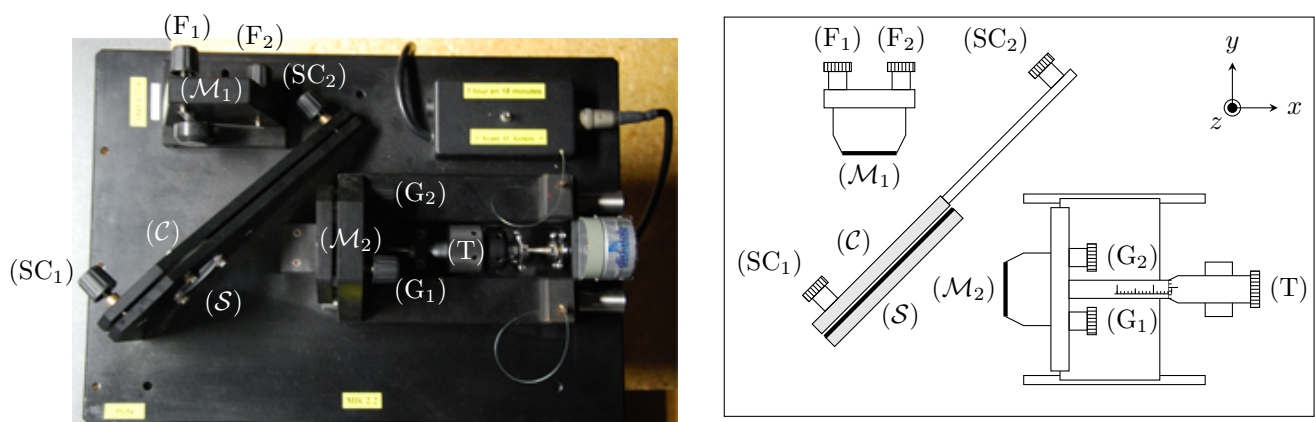


Figure 1 – Photo et schéma d'un interféromètre de Michelson. (a) L'interféromètre photographié est équipé d'un moteur (à droite de la vis T) permettant de charioter mécaniquement et régulièrement le miroir mobile. Ce dispositif est par exemple très utile en spectroscopie.

- ▷ Le miroir \mathcal{M}_1 est le **miroir fixe**. C'est un miroir de précision (planéité garantie avec une précision d'environ 50 nm). Les deux vis F_1 et F_2 , dites « de réglage fin », permettent de le faire pivoter autour des axes (Ox) et (Oz) .

- ▷ Le miroir \mathcal{M}_2 est également un miroir de précision, qui peut pivoter autour des axes (Oy) et (Oz) grâce aux deux vis G_1 et G_2 , dites « de réglage grossier ». En outre, il peut être translaté parallèlement à l'axe (Ox) grâce à la vis de translation T : c'est le **miroir mobile**. Le déplacement de \mathcal{M}_2 est appelé **chariotage** du miroir. La position de \mathcal{M}_2 le long de l'axe (Ox) peut être mesurée grâce à un vernier micrométrique (même système que sur un pied à coulisse ou un palmer).
- ▷ La division d'amplitude proprement dite est réalisée par l'association de deux lames de verre, appelées **séparatrice** \mathcal{S} et **compensatrice** \mathcal{C} . L'une des faces de la séparatrice est partiellement métallisée, ce qui lui permet de réfléchir la moitié de l'énergie lumineuse incidente et d'en transmettre l'autre moitié. Pour un bon fonctionnement de l'interféromètre, ces deux lames doivent être parfaitement planes (planéité garantie à 100 nm près), de même épaisseur (garantie à 1 μm près) et parfaitement parallèles (angle inférieur à 10^{-3} rad). Les deux vis SC_1 et SC_2 permettent de régler ce parallélisme.

I.B - Protocole de réglage en lame d'air

- ▷ Éclairer l'interféromètre avec un **laser vert Nd :YAG non élargi**, de telle sorte que le faisceau atteigne approximativement le centre des miroirs en incidence normale. En jouant sur les vis de réglage grossier, faire en sorte de superposer sur l'écran les deux tâches du faisceau réfléchi par chacun des miroirs.
- ▷ Visser l'objectif de microscope sur le laser pour élargir le faisceau. Positionner le laser de sorte que la tâche du faisceau éclaire le centre du miroir. On doit observer des anneaux ou des portions d'anneaux sur l'écran.
- ▷ Avec les vis de réglage grossier, centrer les anneaux sur l'écran. Avec la vis de translation, faire rentrer les anneaux vers le centre de l'écran, ce qui doit les faire grossir. Répéter alternativement ces deux étapes jusqu'à n'observer plus que quelques anneaux correctement centrés. Si les anneaux sont elliptiques au lieu d'être circulaires, il faut retoucher le réglage du parallélisme entre la séparatrice et la compensatrice : appeler le professeur.
- ▷ Éteindre le laser, et le remplacer par une **lampe spectrale au mercure**. Ajouter au montage un condenseur après la lampe source, et le positionner afin de former l'image de l'ampoule sur les miroirs (tâche lumineuse petite et lumineuse). Ajouter au montage une lentille de projection de grande focale en sortie de l'interféromètre, et placer l'écran dans son plan focal.
- ▷ On doit alors observer des anneaux circulaires sur l'écran. Optimiser leur contraste en jouant sur les vis de réglage fin, ce qui permet de minimiser l'angle de coin d'air résultant. Si les anneaux sont elliptiques au lieu d'être circulaires, il faut retoucher le réglage du parallélisme entre la séparatrice et la compensatrice : appeler le professeur.

I.C - Protocole de réglage en coin d'air

- ▷ Partant du réglage précédent en lame d'air avec une **lampe spectrale**, faire grossir les anneaux jusqu'à ne plus voir qu'une teinte quasi-uniforme sur l'écran, signe que le contact optique est presque atteint.
- ▷ Passer alors en coin d'air en imposant un angle entre les miroirs par une rotation (pas trop grande!) d'une vis de réglage grossier. Accoler le condenseur à la lampe spectrale. Remplacer la lentille de projection par une lentille de focale plus courte (p.ex. 20 cm), et former l'image des miroirs sur l'écran. On pourra s'aider d'un morceau de papier déchiré placé juste devant les miroirs **mais sans les toucher**.
- ▷ On doit alors observer des franges rectilignes sur l'écran. Une des vis de réglage grossier les fait tourner car elle change la direction de l'axe du coin d'air, l'autre modifie l'interfrange en augmentant l'angle sans modifier l'axe.
- ▷ Pour passer en lumière blanche, remplacer la lampe spectrale par une source blanche. Si elle est munie d'un condenseur intégré (c'est souvent le cas), régler celui-ci de façon à ce que l'image de l'ampoule ne soit pas gênante sur l'écran. Si l'interféromètre était suffisamment proche du contact optique, vous observerez des irisations (teintes de Newton) sur l'écran. Si ce n'est pas le cas, chariotter avec beaucoup de délicatesse jusqu'à les observer.
- ▷ Pour revenir en lame d'air, faire diverger l'interfrange en jouant sur les vis de réglage grossier, puis modifier le système d'éclairage et de projection.


II - Étude spectrale d'une diode laser

Cette première série d'expériences a pour objectif d'analyser spectralement la lumière émise par une diode laser. On utilise ici l'interféromètre de Michelson en configuration lame d'air, éclairé par le laser à analyser.

Document 1 : Introduction à la technologie des diodes laser

Dans tous les lasers, un milieu amplificateur de lumière est placé au centre d'une cavité électromagnétique résonante. Le spectre lumineux émis par le laser est donc constitué de fines raies correspondant aux modes propres de la cavité. Le milieu amplificateur étant sélectif en fréquences, seule une très fine bande de longueurs d'onde peut être amplifiée, si bien que la lumière émise est quasiment monochromatique.

Les diodes laser sont des sources laser à base de matériaux semi-conducteurs. Plus précisément, le milieu amplificateur des diodes laser est une jonction PN polarisée en direct, c'est à dire alimentée par un courant direct de l'anode vers la cathode. Les diodes laser sont réalisées en dopant une fine couche déposée sur un substrat cristallin. Les faces clivées du cristal semi-conducteur de part et d'autre de la jonction constituent les miroirs de la cavité laser, qui est donc de très petite dimension.

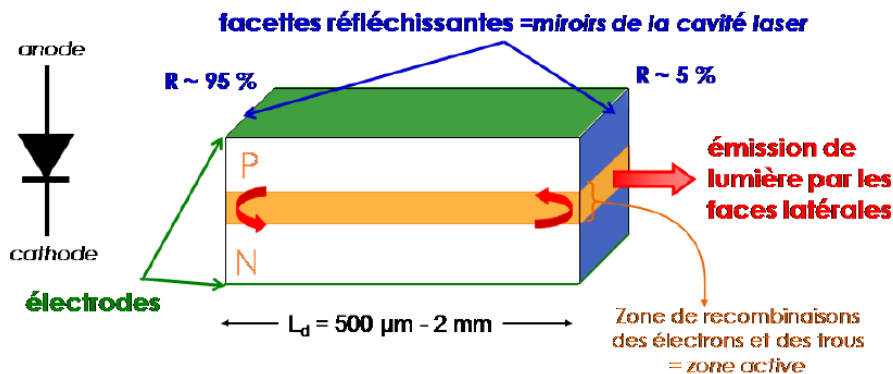

Sous l'effet d'un courant électrique, un processus d'émission de lumière se produit à l'interface entre les couches dopées respectivement P et N, par recombinaison des électrons de conduction porteurs majoritaires dans la couche N avec les trous de valence, majoritaires dans la zone P. Ce processus est très différent de celui mis en œuvre dans un laser à gaz, qui exploite des transitions entre des niveaux d'énergie atomiques très bien définis, si bien que le spectre émis est lui aussi nettement différent, loin de la raie monochromatique. Le spectre d'une diode laser est souvent constitué d'un doublet spectral, correspondant à deux modes propres consécutifs de la cavité.

Adapté d'un TP de l'Institut d'Optique

II.A - Mesure de la longueur d'onde moyenne

Pour mesurer la longueur d'onde moyenne émise par la diode laser, on utilisera le moteur permettant de chariotter le miroir mobile à vitesse constante tout en mesurant l'éclairement au centre des anneaux. La vitesse de déplacement étant connue, mesurer la fréquence de variation de l'éclairement permet de déterminer la longueur d'onde.

📎 Rappeler sans démonstration l'expression de l'éclairement au centre des anneaux en fonction de l'épaisseur de la lame d'air, puis en fonction du temps lorsque le miroir mobile est entraîné à une vitesse constante v_0 .

✎ En déduire le lien entre la fréquence des variations d'éclairement et la longueur d'onde. À partir des informations indiquées sur la diode laser, estimer la valeur attendue de la fréquence.

Espace 2

✎ Proposer et mettre en œuvre un protocole permettant d'étalonner la vitesse v_0 de translation du miroir mobile imposée par le moteur. Estimer l'incertitude.

Espace 3

Mettre en place le dispositif d'acquisition numérique de l'éclairement, utilisant le capteur DMS Didalab amplifié au maximum branché sur une carte Sysam pilotée par le logiciel LatisPro.

✎ Rappeler le critère de Shannon et la résolution en fréquence d'une transformation de Fourier numérique, en fonction de la fréquence d'échantillonnage et du nombre de points d'échantillonnage. En déduire des paramètres d'acquisition pertinents pour la mesure à réaliser.

Espace 4

✎ Réaliser l'expérience et en déduire une valeur expérimentale de λ_0 . Estimer l'incertitude.

Donnée : incertitude composée pour une grandeur de la forme $y = x_1^p x_2^q$

$$\left(\frac{\Delta y}{y}\right)^2 = p \left(\frac{\Delta x_1}{x_1}\right)^2 + q \left(\frac{\Delta x_2}{x_2}\right)^2 .$$

Espace 5

II.B - Mesure de l'écart spectral

🚫🚫🚫 **Attention !** La vitesse de translation du moteur est trop faible pour cette étude, dans laquelle le miroir mobile de l'interféromètre sera charioté **à la main**.

✎ Comment montrer de manière expérimentale et qualitative que le spectre émis par la diode laser se compose d'un doublet spectral ?

Espace 6

✎ Établir l'expression de l'éclairement au centre des anneaux en fonction de la longueur d'onde moyenne λ_0 et de l'écart en longueur d'onde $\Delta\lambda$ du doublet.

Espace 7

✎ À partir de l'expression précédente, définir les coïncidences et anti-coïncidences. Montrer qu'entre deux anti-coïncidences successives le miroir mobile se déplace de

$$\Delta x = \frac{\lambda_0^2}{2\Delta\lambda}$$

Espace 8

✎ Proposer et mettre en œuvre un protocole permettant d'estimer $\Delta\lambda$.

Espace 9

II.C - Longueur de la cavité laser

✎ Proposer un modèle électromagnétique **simple** pour la cavité laser permettant de déterminer ses fréquences propres.

Espace 10

✎ Justifier qualitativement que les modes propres de la cavité sont de la forme

$$E(x, t) = E_0 \sin(kx) \cos(2\pi\nu t).$$

Espace 11

✎ Établir la condition de quantification d'abord sur k , puis en déduire l'intervalle spectral libre de la cavité $\Delta\nu$ (écart en fréquence entre deux modes propres consécutifs) :

$$\Delta\nu = \frac{c}{2nL}.$$

On admet que les ondes électromagnétiques se propagent dans le semi-conducteur à la célérité c/n avec $n \simeq 3,6$ son indice optique.

Espace 12

✎ En déduire que l'écart spectral $\Delta\lambda$ précédemment mesurée est relié à la longueur d'onde moyenne λ_0 et à la longueur de la cavité laser par

$$\Delta\lambda = \frac{n\lambda_0^2}{2L}.$$

✎ En déduire la longueur de la cavité laser. Conclure.

Espace 13

III - Mesure de l'indice optique d'un verre

Cette seconde manipulation permet de mesurer l'indice optique d'un verre. Elle exploite la grande sensibilité des interférences en lumière blanche : comme celles-ci ne sont visibles qu'au voisinage immédiat du contact optique, elles constituent un point de repère utile pour la détermination de chemins optiques.

On désormais l'interféromètre de Michelson en configuration coin d'air, éclairé par une source de lumière blanche. Partant du contact optique, on insère dans l'un des bras de l'interféromètre une fine lame de verre, d'épaisseur e connue, ce qui a pour effet de rallonger le chemin optique parcouru par les rayons traversant la lame. On chariotte ensuite le miroir mobile sur une longueur ℓ permettant de retrouver le contact optique.

✎ Montrer que l'indice optique n du verre est relié au déplacement du miroir mobile par

$$n = 1 + \frac{\Delta x}{e} .$$

Espace 14

✎ Réaliser l'expérience et déterminer n .